


## BARELLA OSPEDALIERA CON TRENDELENBURG

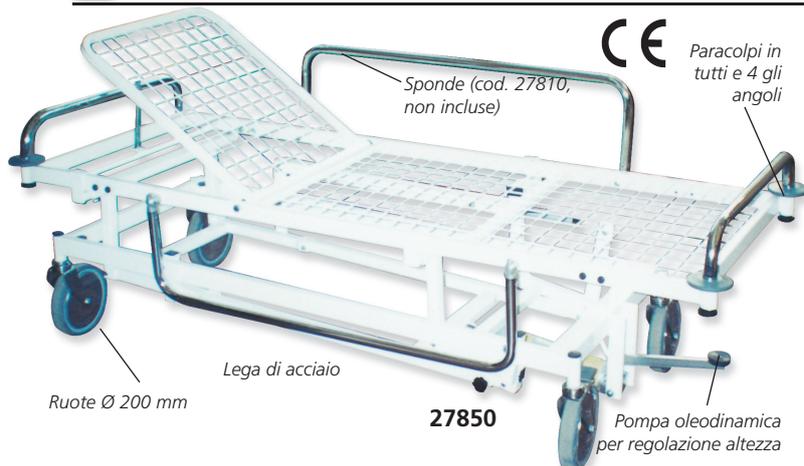

27850

### • 27850 BARELLA TRENDELENBURG

In lega di acciaio, verniciata a fuoco al 9010 con maniglie in acciaio cromato. Altezza regolabile da 50 a 70 cm con pompa oleodinamica. Trendelenburg fino a 9°, Anti-Trendelenburg fino a 14° (pompa a gas). Portata max: 120 kg. 4 ruote Ø 200 mm (2 con freno).

Paraurti in plastica ai 4 angoli.

Dimensioni: 65x184 (interne) xh 50-70 cm 72x191 cm (esterne).

Codice GIMA	ACCESSORI BARELLA TRENDELENBURG
27810	Coppia sponde ribaltabili 100xh 28 cm
27853	Asta portaflebo
27854	Portabombola ossigeno
27855	Materasso - in skay nero ignifugo - 184x64x3 cm spesso 3 cm

## LETTO ALTEZZA VARIABILE

Scomparto per asta solleva malato e asta flebo

4 sponde a contenimento totale in tecnopolimeri, abbattibili singolarmente



Domensioni:  
110x225xh 91 cm

Peso letto:  
130 kg

4 ruote Ø 150 mm con sistema centralizzato per bloccaggio con controllo direzionale

Pannelli testa/piedi sagomati e rimovibili, con maniglioni integrati utili per i movimenti

### • 44800 LETTO ELETTRICO AD ALTEZZA VARIABILE

Letto ospedaliero a 3 snodi e 4 sezioni regolabili elettricamente e ad altezza variabile. Posizione Trendelenburg e Reverse Trendelenburg (15°). Tutte le parti in acciaio sono verniciate con polveri epossidiche con additivo antimicrobico. Sezione schiena regolabile con attuatore elettrico con funzione anti schiacciamento e rototraslazione per evitare la compressione addominale. Su entrambi i lati del letto sono presenti maniglie CPR per manovre d'emergenza. Sezione gambale regolabile da meccanismo a scatto in 6 posizioni. Comandi delle sponde laterali all'interno. Pulsantiera con comandi ad azione mantenuta disattivabile tramite chiave magnetica. La pulsantiera regola lo schienale, l'altezza piano rete, le gambe e i piedi, la posizione comfort, Trendelenburg e Reverse Trendelenburg.

• 44801 ASTA SOLLEVA MALATO  
• 44802 ASTA FLEBO  
• 44803 MATERASSO IGNIFUGO - con fodera impermeabile  
Carico: 280 kg. Densità: 35 kg/m<sup>2</sup>. Dimensioni: 85x195x18 cm.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza piano rete min/max: 380-780 mm  
Regolazione altezza schienale max: 70°  
Regolazione gambe/piedi max: 30°  
Trendelenburg e Reverse Trendelenburg: 15°  
Altezza min/max: 835-1235 mm  
Larghezza/lunghezza totale letto: 1010/2260 mm (con paracolpi e sponde)  
Larghezza/lunghezza utile piano rete: 880/2000 mm  
Alimentazione: 160-230 V - 50-60 Hz  
Capacità di sollevamento dinamico: 230 kg  
Portata massima: 270 kg  
Classe isolamento: I / B  
Grado di protezione: IP66  
Produzione italiana

## LETTO BARIATRICO ELETTRICO

Regolazione elettrica delle sezioni, dell'altezza e delle posizioni TR e RTR

2 sedi per asta flebo nella sezione di testa

PORTATA 400 kg



4 paracolpi integrati

Spalle di testa e piedi facilmente rimovibili con inserto blu in HPL (azzurro, giallo o verde su richiesta)

4 ruote Ø 15 mm

Altezza da terra 15 cm

### • 27636 LETTO BARIATRICO ALLUNGABILE - elettrico, 4 sezioni

Letto bariatrico a 4 sezioni retrattili, in acciaio resistente, con altezza variabile e TR-RTR con motori elettrici.

- regolazione sezioni: alzaschiena 0°-52°, alzagambe 0°-24°  
- pulsantiera manuale per regolazione sezioni e chiavetta interdizione movimenti + supervisore  
- funzione regolazione elettrica CPR - TR e RTR 18°  
- posizione poltrona per maggiore naturalezza e comfort  
- funzione di blocco comandi  
- batteria d'emergenza

- sistema di pedale freno centralizzato a 3 posizioni per una grande maneggevolezza: direzionale, libero, frenato  
- 3x ruote standard Ø 15 cm e 1 ruota antistatica a motrice

• 27638 ASTA DI SOLLEVAMENTO con ganci flebo inclusi

• 27639 PORTACOPERTE ESTRAIBILE


• 27640 ASTA FLEBO

• 44810 MATERASSO BARIATRICO IGNIFUGO - 4 pezzi - con fodera impermeabile e traspirante

Densità: 40 kg/m<sup>2</sup>.

Carico: 300 kg. Dimensioni: 90x200x18 cm

(2 laterali 15x200x18, 1 allunga letto 15x120x18)

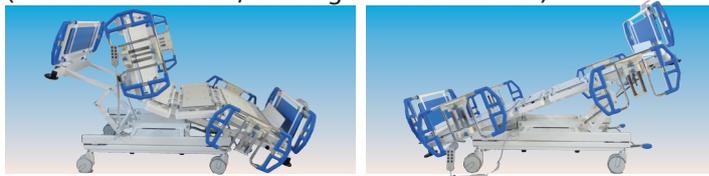

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni telaio superiore letto: - complet. retracts - 226x105 cm (paraurti inclusi)  
- complet. esteso - 242x135 cm (sponde laterali incluse)  
Regolazione piattaforma materasso: - complet. esteso - 200x90 cm  
- posizione intermedia - 200x105 cm  
- complet. esteso - 200x120 cm  
- estensione del piede - da 200 a 220 cm  
Posizione più bassa e più alta: 41-81 cm  
Peso: 175 kg  
Portata: 400 kg  
Protezione elettrica: Class 1  
Grado di protezione liquido: IP 66