


POLTRONE GINECOLOGICHE GYNEX A 1 O 3 MOTORI

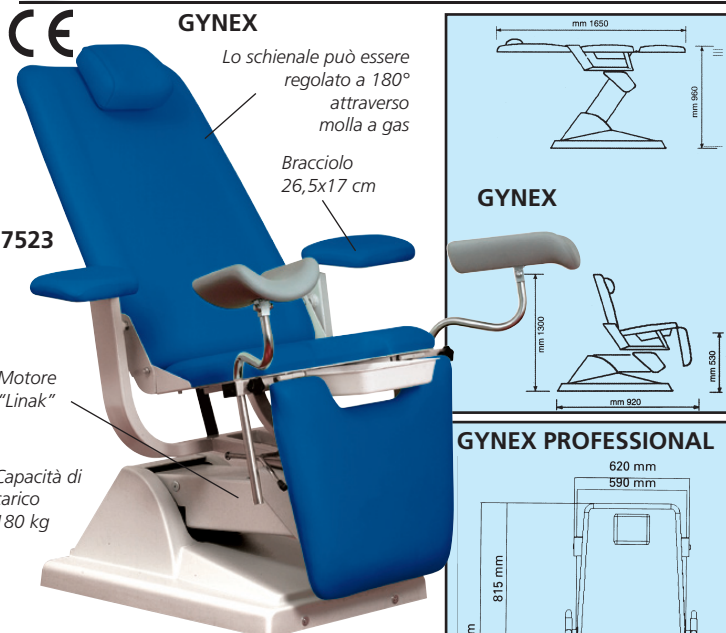

CE

GYNEX

Lo schienale può essere regolato a 180° attraverso molla a gas

Bracciolo 26,5x17 cm

27523

Motore "Linak"

Capacità di carico 180 kg

POLTRONA GINECOLOGICA GYNEX

GYNEX combina funzionalità, estetica e praticità. Seduta e schienale autobilanciati, si adattano facilmente ad ogni esigenza fornendo il massimo comfort. È provvista di un dispositivo di sollevamento elettrico tramite attuatore ad alimentazione secondaria a 24 V con regolazione da 57 cm da terra (posizione 0) a 96 cm. Lo schienale è provvisto di poggiatesta regolabile e porta-rotolo. I poggia-gamba possono essere regolati separatamente e hanno un dispositivo di blocco automatico. Da una posizione a "sedia" può essere trasformato in "lettino". I braccioli sono rimovibili e orientabili separatamente. Il sollevamento della poltrona avviene tramite un comando a pedale. Produzione Italiana.



GYNEX PROFESSIONAL con 3 motori

27512 Giallo Parma

27515 Albicocca metallizzato

27512 Azzurro cielo metallizzato

GYNEX PROFESSIONAL

Poltrona che offre funzionalità, estetica ed ergonomicità, è in grado di soddisfare tutte le necessità del paziente e dell'operatore proprie di una visita ginecologica professionale. È dotata di accessori versatili: portarotolo, bacinella in metallo, supporto per gambe. I 3 motori consentono, oltre al sollevamento, la movimentazione dello schienale e del gambale. Grazie al movimento combinato di schienale e seduta, con meccanismo di auto bilanciamento (azionato tramite un motore silenzioso di 2,500 N), Gynex professional si adatta a qualunque tipo di corporatura e garantisce al paziente il massimo confort. I braccioli imbottiti e rivestiti consentono il mantenimento di una posizione protetta e rilassante, sono orientabili ed asportabili. Lo schienale è provvisto di poggiatesta regolabile in altezza. L'ampio e soffice schienale è regolabile autonomamente tramite un attuatore silenzioso a basso voltaggio. La poltrona è movimentata da un silenzioso motore elettrico alimentato a bassa tensione, che consente un'escursione verticale di 40 cm, partendo dalla posizione di zero. I comandi elettrici vengono azionati da una pratica pulsantiera collegata via cavo alla poltrona. Gynex professionale si può trasformare facilmente in un lettino (posizione orizzontale). Produzione italiana.


	CARATTERISTICHE TECNICHE	
	GYNEX	GYNEX PROFESSIONAL
Alimentazione:	230V - 50 Hz (110V - 60 Hz su richiesta)	
Tensione dei motori:	24 V	24 V
Spinta motore sollevamento:	6.000 N	6.000 N
Spinta motori schienale:	800 N (molla a gas)	2.500 N (motore)
Spinta motori gambale:	-	2.500 N
Capacità sollevamento:	180 kg	180 kg
Massima potenza:	90 VA	90 VA
Protezione fusibile:	1,6 A	1,6 A

POLTRONE E SGABELLI GYNEX								
	Azzurro Parigi	Verde Toronto	Blu Chicago	Arancione Rotterdam	Albicocca Metalliz	Blu mare Metalliz	Colore a scelta	
Gynex professional	27514	27512**	27513	27512**	27515	27512**	27512**	
Gynex	27521	27522	27523	27524	27525	27526	27520**	
Sgabello con anello	27531	27532	27533	27534	27535	27536	27530**	
Sgabello senza anello	27527	← 27528** →						

*Disponibile in 60 giorni, indicare il colore nell'ordine

COLORI A SCELTA: CLASSICI									
Bianco Helsinki	Beige Roma	Beige Tunisi	Marrone Perugia	Giallo Parma	Arancione Praga	Rosso Mosca	Rosa Malaga	Bordeaux Bangkok	
Verde New Delhi	Verde David	Verde Melbourne	Verde Irlanda	Verde Honolulu	Verde Caracas	Viola Nizza	Viola Ankara	Azzurro-Palm beach	
Blu Berna	Blu Baltico	Blu Anversa	Grigio Oslo	Grigio Amburgo	Grigio Londra	Nero Odessa			

COLORI A SCELTA: METALLIZZATI									
Ghiaccio Metalliz.	Argento Metalliz.	Bronzo Metalliz.	Oro Metalliz.	Limone Metalliz.	Rosso Metalliz.	Azzurro cielo Metalliz.	Blu Metalliz.	Grigio Metalliz.	

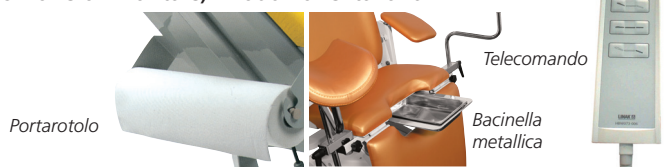

	DOTAZIONE STANDARD	
	GYNEX	GYNEX PROFESSIONAL
Gambale in poliuretano	•	•
Gambale imbottito (colore coordinato)	•	•
Portarotolo	•	•
Bacinella in metallo	•	•
Telecomando	•	•

SGABELLO - con o senza anello poggia piedi

Per uso professionale, costruito interamente in acciaio INOX, ruote gommate girevoli autofrenanti e snodate a 360°. L'altezza può essere facilmente regolata tramite pompa a gas, lo schienale è girevole a 180° e registrabile in profondità. Le imbottiture sono a densità bilanciata e sono rivestite in Peltex. Produzione Italiana.

Altezza min/max: 530/660 mm

27532

27528

• **27518 SERVOMOBILE SW2**
- struttura in acciaio, verniciata con polvere epossidica
- 4 rotelle antistatiche girevoli
Produzione italiana.