

## POLTRONE ORL

Con poggiatesta



27546



Posizione orizzontale


Pedale per alzare/abbassare

DISPONIBILE IN 36 COLORI

\*Vedere colori a pag. 125  
Disponibile in 60 giorni


- 27545 POLTRONA ORL con poggiatesta - colore a richiesta\*
  - 27546 POLTRONA ORL con poggiatesta - verde Melbourne
  - 27547 POLTRONA ORL con poggiatesta - azzurro cielo Parigi
- Poltrona con seduta e schienale in Peltex. Meccanismo di sollevamento tramite attuatore elettrico con pedaliera a doppio comando. Schienale regolabile fino a 180° attraverso pompa a gas. La poltrona ruota completamente su se stessa ed è equipaggiata con un meccanismo di bloccaggio rotazione. Alimentazione: 230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz). Produzione Italiana.

Trendelenburg +5°

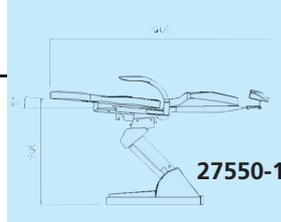

27550-1

Movimento schienale sincronizzato a quello del gambale può essere regolato a 90° ed operare una inclinazione fino ai 190°

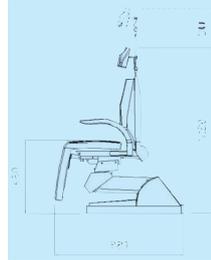

La seduta è regolabile (escursione verticale di 42 cm)

Larghezza 650 mm

480 mm


Poggiatesta su richiesta

27551

Base della seduta in metallo pesante verniciato a polvere, con supporto di braccio pantografo girevole - rotazione di 85° a destra e a sinistra - bloccaggio della rotazione tramite leva

- 27550 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - colore a richiesta\*
  - 27551 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - blu Chicago
  - 27552 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - verde Toronto
- Per piccoli interventi ambulatoriali, movimentata da silenziosi attuatori elettrici azionati da pedaliera a joystick. Dotata di pulsante per tornare nella posizione originale. Rivestimento in skay, imbottitura in gomma indeformabile ad alta densità (50 kg/cm<sup>3</sup>). Seduta e gambale in un pezzo unico. Alimentazione: 230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz). Produzione Italiana.


## RIUNITI ORL

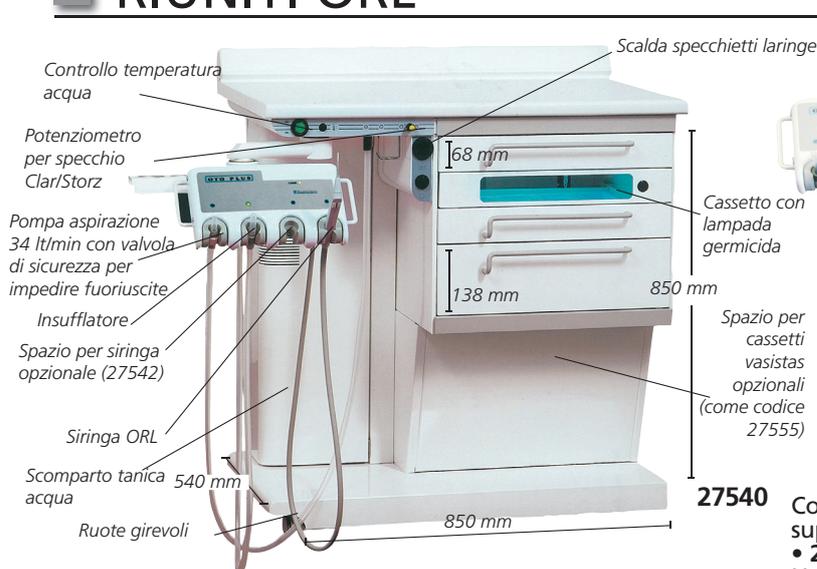

27540

- 27540 OTOPLUS - RIUNITO ORL
- Riunito per ORL su ruote gommate piroettanti, con piano di lavoro in laminato antigraffio con alzatina. Dotato di 3 cassette (2 piccoli ed 1 grande) con comodi scomparti interni amovibili, 1 cassetto con lampada germicida per la sterilizzazione degli strumenti. Il dispositivo Otoplus è fornito con una silenziosa pompa per aspirazione da 34 l/min, con dispositivo di alimentazione completo di potenziometro per specchio Clar/Storz, scaldia specchietti laringe, compressore bi-cilindro a secco per insufflazioni tubariche e serbatoio dell'acqua distillata da 2 litri, con segnale acustico al raggiungimento del livello di riserva. Nel braccio articolato con tavoletta portastrumenti trovano alloggiamento la cannula terminale per l'insufflazione e la siringa per il lavaggio auricolare (un microprocessore mantiene una temperatura costante di 37° C). Alimentazione 230V-50Hz (disponibile 110V/60Hz). Produzione Italiana.
- 27539 OTOPLUS COMPLETO

Asta supporto per monitor

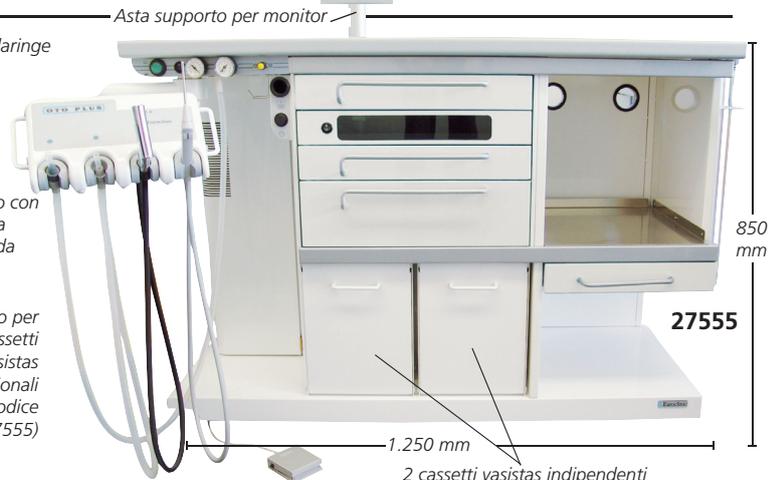

27555

Come codice 27540 con cassette vasistas (codice 27541) e supporto endoscopico (codice 27543)

- 27554 OTOPLUS DC - RIUNITO ORL
  - 27555 OTOPLUS DC - RIUNITO ORL - completo
  - 27541 CASSETTI VASISTAS - 2 cassette indipendenti
  - 27543 SUPPORTO ENDOSCOPI - 2 tubi in plastica trasparenti
  - 27542 KIT MEDICAMENTI
  - 27544 FONTE DI LUCE A LED
- Composto da 1 siringa, 2 nebulizzatori (per liquidi e polveri) e 3 ampole in vetro scuro da ordinare insieme al Riunito ORL. Fornisce luce fredda e bianca (5.500°K, 200 lumen) per uso endoscopico. Può essere connessa agli endoscopi senza il cavo a fibre ottiche. La maniglia connette direttamente agli endoscopi rigidi (connessione Storz)

Display LCD:  
12,8x6,4 cm

Dimensioni: 30x25x12 cm