

## POLTRONA PODOLOGICA HYDRA - PRODUZIONE ITALIANA

- 28033 POLTRONA PODOLOGICA HYDRA - verde David
- 28035 POLTRONA PODOLOGICA HYDRA - altri colori

Poltrona podologica compatta e funzionale. Il movimento su/giù attivato tramite un interruttore a pedale è sincronizzato con l'inclinazione della sedia allo scopo di facilitare il sollevamento dei piedi del paziente in una posizione di lavoro ottimale, permettendo all'operatore di mantenere la giusta postura durante tutta la durata della terapia. Un silenzioso attuatore elettrico attiva il movimento permettendo un sollevamento verticale in un intervallo


di 40 cm (altezza minima 55 cm - altezza massima 95 cm). In combinazione con l'inclinazione della poltrona, permette al tallone di raggiungere l'altezza di 120 cm dal pavimento. Lo schienale è regolabile manualmente a 180° con l'utilizzo di una potente molla a gas. L'imbottitura ergonomica delle componenti garantisce un elevato comfort per il paziente. Il doppio poggiatesta ruotabile orizzontalmente e il poggiatesta estendibile mantengono il piede in diverse posizioni di lavoro. Comodi braccioli imbottiti. Capacità di sollevamento: 180 kg. Peso della poltrona: 80 kg. Alimentazione elettrica: 230V - 50/60 Hz.



28033

COLORI A SCELTA: CLASSICI*							
Bianco Helsinki	Beige Roma	Beige Tunisi	Marrone Perugia	Giallo Parma	Arancione Praga	Rosso Mosca	Rosa Malaga
Bordeaux Bangkok	Verde New Delhi	Verde Melbourne	Verde Irlanda	Verde Honolulu	Verde Caracas	Arancione Rotterdam	Viola Nizza
Viola Ankara	Azzurro Palm beach	Blu Berna	Blu Baltico	Blu Anversa	Grigio Oslo	Grigio Amburgo	Grigio Londra
Nero Odessa	Azzurro Parigi	Verde Toronto	Blu Chicago				

COLORI A SCELTA: COLORI METALLICI							
Ghiaccio Metalliz.	Argento Metalliz.	Bronzo Metalliz.	Oro Metalliz.	Limone Metalliz.	Rosso Metalliz.	Azzurro cielo Metalliz.	Blu Metalliz.
Grigio Metalliz.	Albicocca Metalliz.	Blu mare Metalliz.					

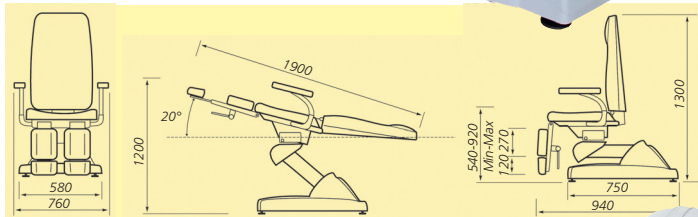

\*Disponibile in 60 giorni - specificare colore con l'ordine

## POLTRONE PER PODOLOGIA



45232

- 28025 POLTRONA ELETTRICA PODOLOGIA - 3 motori - blu
- Poltrona con controllo elettrico per regolare l'altezza, lo schienale e l'inclinazione della seduta in modo indipendente mediante un pedale o una pulsantiera. La testiera può essere inclinata e i braccioli sono regolabili. Portata massima: 170 kg. Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz. Dimensioni: 186x56x58/89 cm. Peso netto/lordo: 83/96 kg
- 45232 SGABELLO - blu
- 45242 SGABELLO CON SCHIENALE - blu



28020

- 28020 POLTRONA PODOLOGIA - meccanica - bianca
- Questa poltrona si può alzare, abbassare e ruotare su se stessa. I braccioli e i poggiatesta sono regolabili. La base tonda solida assicura la massima stabilità. Dimensioni: 180x80xh 51/65 cm. Portata massima: 170 kg. Peso: 41 kg.
- 45231 SGABELLO - bianco
- 45241 SGABELLO CON SCHIENALE - bianco

## RIUNITI GAMMA PER PODOLOGIA - PRODUZIONE ITALIANA

- 28030 RIUNITO GAMMA 1 - 61x45xh 77 cm - piccolo
  - 28031 RIUNITO GAMMA 3 - 108x45xh 77 cm - grande
- Mobili dotati di piano antigraffio, cassetti ed ante per la conservazione allo stato sterile di utensili e accessori. Muniti di ruote piroettanti alla base consentono di essere spostati per favorire la massima ergonomia e praticità di utilizzo. Un cavo elettrico consente l'allacciamento alla presa di rete per fornire l'alimentazione elettrica al vano germicida al portalampada e ad alcune prese di corrente. Alimentazione: 220 V - 50/60 Hz.

	DIMENSIONI				vano germicida	scomparto grande
	riunito		piano			
Lunghezza:	61 cm	108 cm	61 cm	108 cm	28 cm	28 cm
Larghezza:	45 cm	45 cm	42 cm	42 cm	38 cm	28 cm
Altezza:	77 cm	77 cm			4 cm	15 cm



28030

28031

Pannello di controllo  
Cassetto a scorrimento con frontalino in vetro temprato spesso 5 mm e protezione dai raggi U.V.  
Ampio scomparto per micromotore  
Ripiano estraibile  
Anta sul lato dello scomparto