

LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA

- 27613 LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - blu - 9
- 27612 LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - colori a richiesta*

*Disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori

Letto regolabile in altezza (48-95 cm) tramite accumulatore elettronico (Linak 6.000 N) controllato da pedale, con testata facilmente inclinabile (da +60° a -10°) mediante una pompa a gas.

Struttura solida ed elegante in tubolare ovale 50x25x2 mm, per il telaio centrale un quadro di 50x20x1,5 mm rivestito con vernice epossidica in polvere bianco RAL 9003, spessore minimo 70/80 micron, finitura lucida. Piano in materiale ligneo, imbottito di poliuretano ad alta densità rivestito con similpelle. Entrambi i materiali sono ignifughi Classe 1 IM.

Il tessuto è lavabile con i più comuni detersivi. Porta rotolo incluso. Portata massima: 150 kg. Produzione italiana.



Dimensioni: 190x60xh 48/95 cm
Peso: 70 kg



27613



LETTINO AD ALTEZZA VARIABILE CON TR/RTR

- 44510 LETTINO LORD AD ALTEZZA VARIABILE - verde acqua - 5
- 44516 LETTINO LORD AD ALTEZZA VARIABILE - colore a richiesta*

*Disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori


Letto stabile e robusto fabbricato in tubolare da mobilio di alta qualità. Comodo, pratico e facile da utilizzare.

L'altezza è regolabile mediante due colonne elettriche che possono muoversi contemporaneamente o separatamente (consentendo le posizioni Trendelenburg e Trendelenburg inversa) tramite una pulsantiera. Una leva ergonomica, posta sotto il telaio superiore, aziona una molla a gas che permette di inclinare il cuscino.

Ripiano ad alta densità ignifuga Classe 1 IM, imbottito in gomma, ricoperto da materiale vinilico in ecopelle ignifuga Classe 1 IM. Lavabile con i principali detersivi presenti in commercio.


Conforme a: EU 93/42 CEE. Portata massima: 200 kg. Fornito con tappo per foro naso-bocca, portarotolo e 4 piedini regolabili.

- 44505 ROTELLE A SCOMPARSA/REMOVIBILI

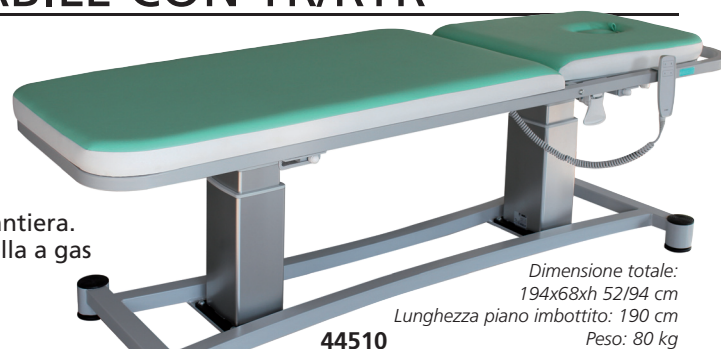

Dimensione totale:
194x68xh 52/94 cm
Lunghezza piano imbottito: 190 cm
Peso: 80 kg

44510

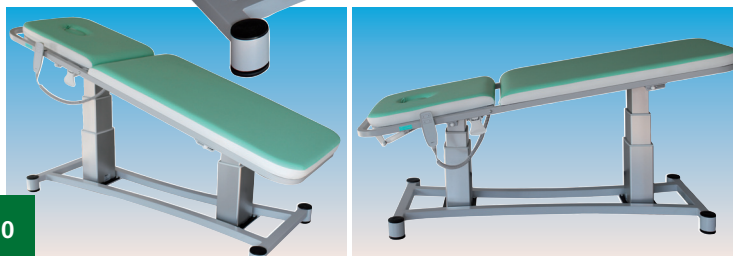

LETTINO TRATTAMENTO A 2 SEZIONI ED ALTEZZA VARIABILE SUN

- 44530 LETTINO TRATTAMENTO A 2 SEZIONI ED ALTEZZA VARIABILE SUN - arancione - 3
- 44536 LETTINO TRATTAMENTO A 2 SEZIONI ED ALTEZZA VARIABILE SUN - colore a richiesta*

*Disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori

Letto realizzato in tubolare da mobilio di alta qualità che lo rende molto robusto. Cuscino reclinabile per mezzo di una molla a gas attivata da una leva ergonomica posta sotto il telaio superiore. Testata inclinabile da +45° a -30°.

Altezza regolabile mediante due colonne elettriche attivate da una pulsantiera. Ripiano ad alta densità ignifuga Classe 1 IM, imbottito in gomma, ricoperto da materiale in ecopelle. Lavabile e disinfettabile con i principali detersivi presenti in commercio.

Dimensioni complessive: 195x68xh 48/89 cm. Peso: 80 kg.

Conforme a: EU 93/42 CEE. Portata massima: 200 kg.

Fornito con tappo per foro naso-bocca, portarotolo, 2 braccioli regolabili e 4 piedini regolabili.

- 44505 ROTELLE A SCOMPARSA/REMOVIBILI


- 44540 CUSCINO A CUNEO 50x50xh 15 cm - arancione
- 44545 CUSCINO A CUNEO 50x50xh 15 cm - colore a richiesta
- 44550 CUSCINO A SEMI-CILINDRO 20x50xh 10 cm - arancione
- 44555 CUSCINO A SEMI-CILINDRO 20x50xh 10 cm - colore a richiesta



Braccioli
35x13 cm

Testata
65x36 cm

44530

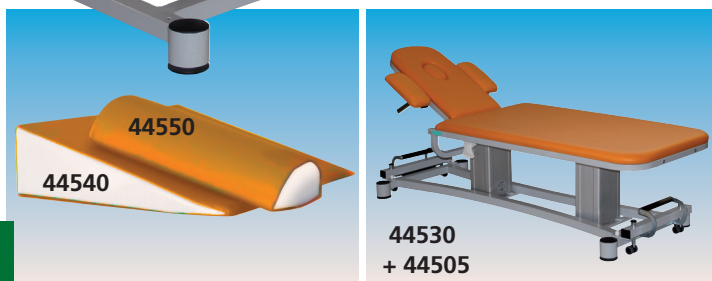

44550
44540

44530
+ 44505

