

## ORTHOMAG MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA - 2 PROGRAMMI

- Osteogenesi
- Biostimolazione
- Gestione dolori



• **28298 ORTHOMAG MAGNETOTERAPIA A BASSA FREQUENZA**  
 Dispositivo di magnetoterapia a bassa frequenza da portare con sé ovunque. Pratico, leggero e adattabile alla forma del corpo del paziente. Funziona sia a batteria, per utilizzo esterno, sia a corrente elettrica per utilizzo domiciliare. Orthomag comprende 2 programmi (75 Hz e 50 Hz) studiati appositamente per le patologie dei tessuti ossei, i problemi alle articolazioni e i dolori generici. Fino a 25 Gauss per programma. Fornito con batteria al litio ricaricabile 3,7 V 900 mAh, caricatore da parete (cavo 1,5 m), applicatore universale flessibile (cavo 1,5 m), test magnete di emissione, 2 fasce elastiche (S e L), borsa per il trasporto, manuale (GB, FR, IT, ES). Su richiesta DE.



28298



Magnetoterapia in movimento

## MAG 700 MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA, ALTA INTENSITÀ

• **28296 MAG 700 MAGNETOTERAPIA - 1 canale**

Nuovo dispositivo di magnetoterapia portatile ideale per l'utilizzo a domicilio. MAG 700 offre un risultato professionale di alto livello ed è utile per il trattamento di numerose patologie.

I suoi accessori di base consentono una terapia pratica e comoda a domicilio. MAG 700 presenta 7 programmi pre-impostati per la cura di diverse patologie, 3 programmi identificati dalla frequenza di funzionamento (da 5 a 20 Hertz) e un programma di autoscansione a variazione continua di frequenza per trattare i tessuti morbidi e duri simultaneamente.

Possibilità di regolare l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi fino a 70 Gauss.

Le frequenze di funzionamento sono tra 5 e 100 Hertz.

Fornito con cintura elastica per terapia con 2 solenoidi, alimentatore, borsa per il trasporto e manuale d'uso (GB, FR, IT, ES).



28296



28296

11 PROGRAMMI		
7 programmi pre-impostati	3 frequenze+autoscansione	
Osteoartriosi	5 Hz	Autoscansione
Osteoporosi	10 Hz	
Artrite	20 Hz	
Fratture		
Dolori articolari		
Dolori muscolari		
Anti-infiammatorio		

## MAG 2000 MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA, ALTA INTENSITÀ

• **28300 MAG 2000 MAGNETOTERAPIA - 2 canali**

• **28311 MAG 2000 PLUS MAGNETOTERAPIA - 2 canali**

Dispositivo per magnetoterapia domiciliare e professionale dotato di 2 canali da 150 Gauss ciascuno per trattare diverse zone del corpo attraverso la fascia elastica terapeutica a 3 solenoidi.

**35 programmi:** 20 programmi preimpostati per il trattamento delle patologie più comuni, 14 programmi identificati dalla frequenza di lavoro (da 1 a 100 Hertz) e un programma Autoscansione.

variazione continua di frequenza per il trattamento dei tessuti molli e duri nella stessa seduta di terapia. MAG PLUS offre la possibilità di archiviare fino a 10 memorie utente, scegliendo la frequenza fino a 120 Hz, l'intensità e la durata della terapia: un supporto ottimale per i professionisti che necessitano di un programma specifico per ogni paziente.

MAG 2000 permette di impostare liberamente l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi, con valori massimi fino a 300 Gauss sulle due uscite (150 Gauss per uscita). Potenza operativa 110-240 V. Fornito con fascia elastica terapeutica con 3 solenoidi e borsa per il trasporto, alimentazione e manuale (GB, FR, IT, ES). Su richiesta DE.

• **28299 FASCIA ELASTICA TERAPEUTICA - ricambio**

Fornita con cavo con 3 solenoidi per trattamenti di magnetoterapia a bassa frequenza.



28311

Cintura per terapia elastica

Paio di solenoidi professionali

35 PROGRAMMI (28300) - 45 PROGRAMMI (28311)			
20 programmi pre-impostati		14 freq. di lavoro+autoscans	
Osteoporosi	Contusioni intercostali	1 Hz	50 Hz
Artrosi	Lombalgia	3 Hz	60 Hz
Artrite	Artrosi del ginocchio	5 Hz	70 Hz
Artrosi cervicale	Mal di schiena	10 Hz	80 Hz
Dolori articolari	Artrosi della spalla	15 Hz	90 Hz
Cervicalgie	Periartrite	20 Hz	100 Hz
Distorsioni	Coxartrosi	30 Hz	Autoscan
Fratture	Atrofie muscolari	40 Hz	
Epicondilita	Contratture muscolari		
Epitrocleite	Osteonecrosi		
		10 memorie (solo 28311)	


## OSTEOMAT 2000: PER TRATTAMENTI DI MAGNETOTERAPIA A BASSA FREQUENZA

• **28307 MATERASSINO PER MAGNETOTERAPIA OSTEOMAT 2000**  
 Osteomat è costituito da 4 settori (2 attivi e 2 passivi) uniti da velcro per formare un vero e proprio materasso. I due settori attivi consentono la biostimolazione di un'ampia parte del corpo grazie a 6 solenoidi professionali. I due settori passivi permettono di ricreare una superficie piana dove i pazienti possano distendersi. Ogni settore attivo è personalizzabile in base alle esigenze terapeutiche scegliendo la posizione dei solenoidi. In caso di osteoporosi si consiglia di posizionare i solenoidi in modo che stimolino le spalle, la schiena e il bacino. I programmi utilizzabili sono quelli del MAG2000 e del MAG2000 PLUS.

Adatto per la terapia notturna durante il sonno, per la terapia diurna dei pazienti paralizzati, per pazienti attivi che mal sopportano di restare a lungo collegati alla fascia terapeutica e preferiscono la terapia notturna.

Manuale: GB, FR, IT, ES, su richiesta DE.

28307

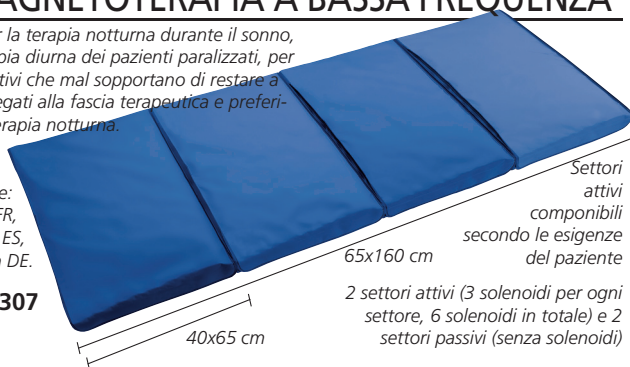

Settori attivi componibili secondo le esigenze del paziente

2 settori attivi (3 solenoidi per ogni settore, 6 solenoidi in totale) e 2 settori passivi (senza solenoidi)