

ETILOMETRO PROFESSIONALE

- 24491 ETILOMETRO FIT-333 con stampante
- 24486 ETILOMETRO A RICALIBRAZIONE FACILE AT500 con stampante - disponibile da Gen 2018
- 24487 MODULO SENSORE PRE-CALIBRATO per 24486 - ricambio
- 24494 TUBI MONOUSO per 24486, 24491 - conf. da 100 pz.
- 24495 ROTOLI CARTA per 24491 - conf. da 10 rotoli

Etilometro professionale con sensore a cella, con stampante e touch screen. Il sensore a cella è un disco poroso con un sottile strato di platino nero su entrambi i lati, e qualsiasi alcool venga a contatto con la superficie della cella viene ripartito chimicamente. Per ogni molecola di alcool ripartita, un dato numero di elettroni viene liberato durante il processo. Il numero di elettroni generati è proporzionale alla quantità di alcool. Auto ricalibrazione (solo 24486): sostituzione facilitata del modulo pre-calibrato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	24491	24486
Schermo:	LCD a colori touch screen 3,2 TFT	LCD a colori touch screen 3,5
Tastiera:	5 tasti: "Up", "Down", "Left", "Right", "OK"	schermo tattile
Alimentazione:	batteria ricaricabile AA (circa 2.500 mAh)	batteria Li-Ion ricaricabile 7,4 V
Riscaldamento:	la camera e il sensore si riscaldano automaticamente	
Automonitoraggio flusso:	rilevamento automatico del flusso	
Temperatura di funzionamento:	da -20° a +70° (ottimale da -20° a +40°)	da -20 a +45°C (ottimale da 5 a 40°C)
Download dati:	porta USB	
Compatibilità:	Windows XP, 7**	
Memorie:	10.000-18.000 memorie per circa 3.000 test complete	50.000 memorie test completi
Precisione numerazione:	Nome driver, numero veicolo, nome ispettore, risultati test con stampa data e ora, luogo, calibrazione... - Derivazione standard ±0,025 mg/L o ±5% della misura - - Deviazione: generalmente <0,8% della misura valore/mese -	
Calibrazione*:	tramite servizio apposito	tramite sostituzione del modulo di sensore precalibrato
Unità di misura:	mg/L, mg/100 L, %BAC, %BAC	mg/L, mg/100 L, %BAC, %BAC

*Necessità di calibrazione ogni 12 mesi **Esportazione file in formato Excel (solo 24486)

24491

Dimensioni:
188x78x33 mm
Peso: 300 g

24486

Etilometro¹ fornito con stampante integrata, 25 boccagli², 1 boccaglio grande³, cavo di alimentazione⁴, cavo alimentazione 100-240V, 50/60 Hz², modulo wireless^{5,9} per stampante FIT-333, adattatore auto USB⁷, borsetta trasporto¹⁰, 4 rotoli di carta¹¹, caricatore¹².

TEST DI AUTO-CALIBRAZIONE

ETILOMETRO

• 24500 ETILOMETRO
Apparecchio compatto per misurare la concentrazione d'alcol nel sangue, dotato di un'interfaccia grafica digitale con animazioni. Apparecchio utilizzabile con una sola mano. Valori ‰ BAC e mg/l. Fornito in scatola di cartone con tre tubi Ø 7 mm in cui soffiare e un tappo per pulire. Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT

- 24501 TUBI MONOUSO - conf. da 12 pz.
- 32200 BATTERIE "AAA" - blister da 4 pezzi
- 24503 ESPOSITORE DA BANCO - Italiano
- 24504 ESPOSITORE DA BANCO - Inglese

AUTODIAGNOSI



L'espositore può contenere 6 etilometri

Ampio display (2,7 x 2 cm) retroilluminato per visualizzare il valore esatto riscontrato (schermo in 3 colori)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione: da meno di 0,15 ~ 1,50 ‰ BAC o 0,075 ~ 0,75 mg/l
Precisione: ±0,2‰ BAC al punto di calibrazione
Batteria: 3 x 1,5V AAA batterie (non incluse)
Display: grafico e digitale con 3 punti decimali (Es.: 0,025‰BAC)
Tolleranza di compensazione: funzione di pre allerta e retroilluminazione tricolore
Campionamento alito: circa 5 secondi di campionamento continuativo dell'alito
Ciclo rilevazione: circa 20 secondi
Dimensione unitaria: 107x45x25 mm circa
Peso: 50 g (senza batteria)
Calibrazione livello d'allarme: 0,5 ‰ BAC o 0,25 mg/l



24500

ETILOMETRO TASCABILE

- 24499 ETILOMETRO TASCABILE
Portatile, facile da usare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione: 0,2 ~ 1,5 ‰ BAC
Precisione: ± 0,2 ‰ BAC al punto di calibrazione (livello allarme)
Alimentazione: 2 batterie 1,5 V AAA (non incluse)
Display: digitale
Tolleranza di compensazione: funzione di pre allerta al raggiungimento della soglia limite di tasso alcolico
Spegnimento automatico: 2 minuti
Campionamento alito con rilevazione del flusso automatica: circa 6 secondi di campionamento continuativo dell'alito
Ciclo rilevazione: 20 secondi
Calibrazione livello d'allarme: 0,5% BAC



TASCABILE, SOLO 8,5x3x1 cm



STRISCE TASSO ALCOLICO

- 24502 STRISCE SALIVARI TEST ALCOLIMETRICO - confezione da 25 test

Test GIMA rapido ad alta sensibilità per la determinazione da campione di saliva del relativo tasso alcolimetrico nel sangue.
- risultati in soli 3-5 minuti.
- lo schema colore fornisce indicazione della concentrazione relativa di alcool nel sangue (BAC) da 0,02% a 0,30%.
- non richiede l'uso di alcuno strumento.
- non richiede la raccolta delle urine
- scadenza prodotto: 10-22 mesi
- per uso professionale

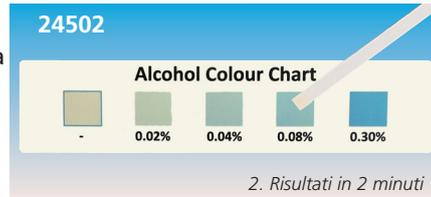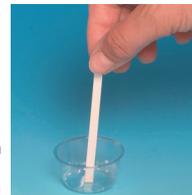


2. Risultati in 2 minuti

TEST SALIVARE MULTIDROGHE - 8 DROGHE

- 24566 TEST MULTIDROGHE MIDSTREAM saliva - conf. da 20 test
Un unico dispositivo multiparametro per la rilevazione

simultanea di 8 diverse droghe in 10 minuti. Sistema economico ed efficace per verificare il consumo di sostanze illecite da parte dei lavoratori. Per uso professionale.

TEST SALIVARE MULTIDROGHE			
Droga	Cut off	Droga	Cut off
Oppiacei	40 ng/ml	Cocaina	30 ng/ml
Morfina	40 ng/ml	Cannabinoidi (THC)	25 ng/ml
6-MAM	4 ng/ml	Anfetamine, m-Anfetamine	40 ng/ml
Idrocodone e Ossicodone	40 ng/ml	MDMA, MDA	50 ng/ml

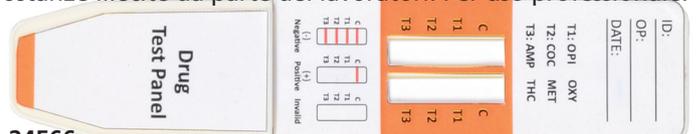

24566