

## TENS EMS-SMART

### • 28355 TENS EMS-SMART

La TENS è una tecnica di elettroterapia utilizzata in fisioterapia con finalità antalgiche. È usata per il trattamento di una vasta gamma di problemi legati al dolore fisico: dolori acuti, cronici, muscolari, post-operatori e da gravidanza. È suddivisa in: convenzionale, endorfinica, a scansione, ai valori massimi, Burst. L'EMS è una tecnica di stimolazione che favorisce le contrazioni muscolari tramite impulsi elettrici. Come nella TENS, gli impulsi sono applicati al paziente tramite elettrodi posti vicino ai muscoli da trattare.

L'EMS è usata per la riabilitazione muscolare post traumatica e post operatoria, e a complemento dell'attività sportiva. Abbiamo unito in un unico prodotto i programmi base dei trattamenti TENS ai protocolli per EMS.

SMART TENS è l'unico nella sua categoria ad offrire la possibilità di personalizzare 1 trattamento TENS ed 1 trattamento EMS con i parametri scelti dall'utilizzatore o dal medico/ fisioterapista, per trattare dolori cronici e acuti (TENS) e per il rafforzamento e la stimolazione muscolare (EMS). Fornito con 2 cavi per gli elettrodi, 4 elettrodi pregellati con cavo, 1 clip da cintura, 4 batterie AAA, 1 manuale (GB, FR, IT, DE, ES) in una borsa di trasporto.

Tastiera digitale



**28355**  
Guida veloce sul display

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- elettroterapia combinata a 2 canali indipendenti.
- generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata.
- 6 programmi TENS memorizzati
- frequenza della forma d'onda da 2 a 120 Hz
- dimensioni: 68x100x31 mm
- larghezza d'impulso da 50 a 400µs
- peso: 85 g (senza pile).
- 5 programmi EMS memorizzati
- intensità massima 60 mA
- 1 programma TENS libero.
- 4 pile AAA
- 1 programma EMS libero

## TENS GIMA - STIMOLATORI MUSCOLARI ELETTRICI

Dimensioni: 128x56x14 mm  
Dimensioni LCD: 48x25.4 mm  
Peso: 67 g

Manuale: GB, FR, IT, ES,  
DE, PT, GR, PL.

Dimensioni: 162x10.7x120 mm  
Dimensioni LCD: 31x37 mm  
Peso: 200g

**4 CANALI  
30 PROGRAMMI**



**28342**

### • 28342 TENS GIMA 9 - 2 canali

TENS tascabile con 2 canali, 9 programmi e 9 intensità regolabili. Attenua i dolori muscolari e stimola la circolazione sanguigna. Frequenza: 2-80 Hz.

Fornito in una custodia di nylon con 2 batterie AAA e 4 elettrodi.

- 28351 Elettrodi pregellati 40x40 mm - conf. da 4 - ricambio
- 28343 Cavetti per elettrodi - conf. da 2 - ricambio



**28365**


Manuale:  
GB, FR, IT, ES, PT.

### • 28365 TENS GIMA 30 - 4 canali

Stimolatore muscolare elettrico tascabile con 4 canali e 30 programmi. Display LCD retro illuminato. Frequenza: 2-2.000 Hz. Fornito in una custodia di nylon con 2 batterie AAA e 8 elettrodi.

- 28366 Elettrodi - conf. da 8 - ricambio
- 28367 Cavetti per elettrodi - conf. da 4 - ricambio
- 28368 Alimentatore rete 230 V - 50 Hz


## ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO PER ELETTROSTIMOLAZIONE

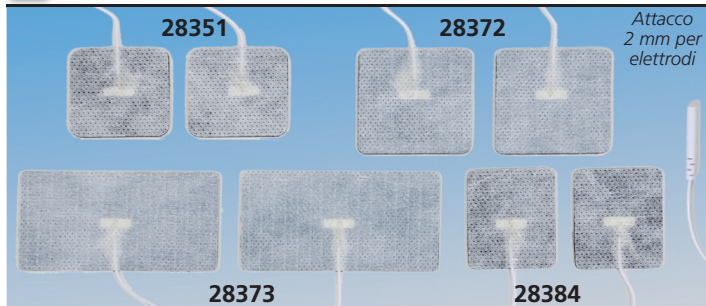

Attacco 2 mm per elettrodi

**ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO CON CAVO - latex free**  
Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla flessibilità del materiale di supporto al gel solido (che mantiene inalterate le proprietà conduttive ed adesive). Gli elettrodi sono dotati di un cavetto lungo 10 cm, con attacco femmina da 2 mm.

- 28384 Elettrodi pregellati 45x35 mm con cavo - conf. da 4 pz.
- 28351 Elettrodi pregellati 40x40 mm con cavo - conf. da 4 pz.
- 28372 Elettrodi pregellati 46x47 mm con cavo - conf. da 4 pz.
- 28373 Elettrodi pregellati 45x80 mm con cavo - conf. da 4 pz.

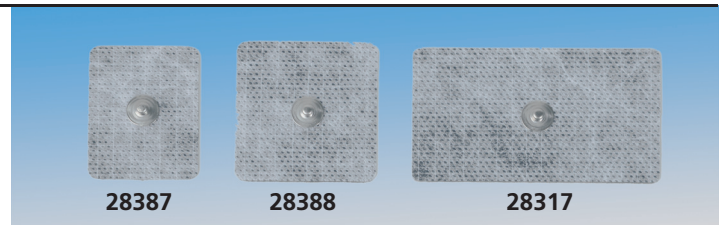

**ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO E ADATTATORI - latex free**  
Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla flessibilità del materiale di supporto al gel solido (che mantiene inalterate le proprietà conduttive ed adesive).

- 28387 Elettrodi pregellati 45x35 mm - conf. da 4 pz.
- 28388 Elettrodi pregellati 46x47 mm - conf. da 4 pz.
- 28317 Elettrodi pregellati 45x80 mm - conf. da 4 pz.
- 28390 Adattatori clip 2 mm - nero - conf. da 10 pz.
- 28391 Adattatori clip 2 mm - rosso - conf. da 10 pz.
- 28392 Adattatori clip 4 mm - nero - conf. da 10 pz.
- 28393 Adattatori clip 4 mm - rosso - conf. da 10 pz.

