


TEST RAPIDO CLAMIDIA

• **29117 TEST RAPIDO CLAMIDIA** - conf. da 20 test
Garantisce risultati accurati in 10 minuti, fornendo al medico una diagnosi immediata.
Test ad alta sensibilità e specificità.
Ogni confezione include 20 test, reagenti, tamponi cervicali femminili, gocciolatori, pipette e manuale utente. Per uso professionale.

Tampone campione Uomo / Donna
- Aggiungere il reagente A e B al campione
- Aggiungere 3 gocce del campione estratto
- Leggere il risultato dopo 10 minuti

Campione urine Uomo
- Aggiungere il reagente B e A al campione
- Aggiungere 3 gocce del campione estratto
- Leggere il risultato dopo 10 minuti

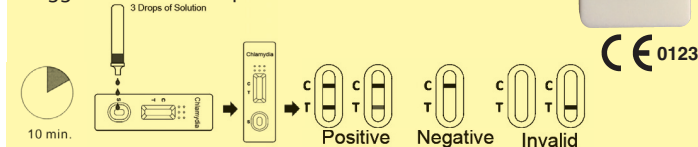


TEST CANDIDA ALBICANS

• **29105 TEST CANDIDA** - conf. da 20 test
Test rapido immunocromatografico, grazie alla presenza di anticorpi specifici è in grado di individuare la presenza di Candida in soli 10/20 minuti. Il test è stato comprovato da studi indipendenti e presenta una sensibilità superiore al 98% e specificità superiore al 94% rispetto ai metodi di riferimento (come il BD Affirm, USA).
La riproducibilità si pone al livello più alto dei test rapidi. La Candida colpisce il 50% delle donne almeno una volta nella vita ed i sintomi possono essere scambiati per quelli della vaginite batterica o altre vaginiti, l'uso di questo test coadiuvato dal test sul pH vaginale (vedere codice 29110) consente la discriminazione tra le due patologie.
Per uso professionale.



TEST VAGINITE


Il test comprende:
1 test +
tampone vaginale +
campione in singola
confezione
(soluzione di contrasto)
+ manuale in italiano
ed inglese

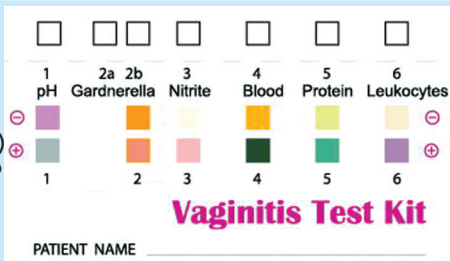

• **29111 KIT TEST VAGINITE** - conf. da 1 test
Un test unico e rivoluzionario per ginecologi, ambulatori, consultori. Rileva in soli 10 minuti la causa di infiammazioni/infezioni vaginali, sostituendo i test tradizionali che richiedono giorni, riducendo a un decimo i costi. Qualora necessario, diluire il fluido vaginale in una soluzione di controllo e poi trasferire al reagente. Il manuale d'uso fornisce una guida dettagliata che consente di interpretare i risultati: Tricomoniasi, Batteri gram-negativi, Gardnerella, Clamidia, Batteri responsabili di gravi vaginiti. Per uso professionale.

TEST PH VAGINALE

Il kit contiene
10 tamponi in
cotone + 10 strisce
reagenti in singola
scatola di cartone
con manuale d'uso
(italiano + inglese).

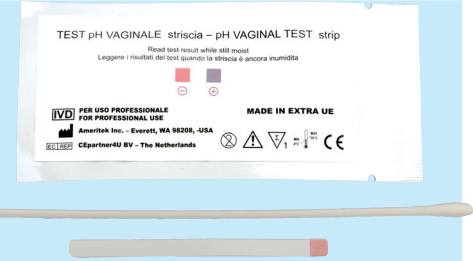

• **29110 TEST PH VAGINALE** - conf. da 10 test
Test veloce per determinare il Ph vaginale.
Una facile procedura permette di verificare in un solo minuto se il Ph è entro i parametri fisiologici (< 4,7). Un aumento del livello di Ph può indicare un cambiamento nell'area vaginale. Il test è ideale in caso di gravidanza e diabete.
Per uso professionale.

PESSARI IN GOMMA E SILICONE PER PROLASSO UTERINO - LATEX FREE



Confezionati singolarmente in scatola di cartone con manuale in italiano ed inglese



codice GIMA	PESSARI IN GOMMA - autoclavabili*
29882	Pessario in gomma Ø 55 mm
29963	Pessario in gomma Ø 60 mm
29964	Pessario in gomma Ø 65 mm
29965	Pessario in gomma Ø 70 mm
29966	Pessario in gomma Ø 75 mm
29967	Pessario in gomma Ø 80 mm
29968	Pessario in gomma Ø 85 mm
29969	Pessario in gomma Ø 90 mm
29884	Pessario in gomma Ø 95 mm
PESSARI IN SILICONE - autoclavabili*	
29892	Pessario in silicone Ø 55 mm
29893	Pessario in silicone Ø 60 mm
29894	Pessario in silicone Ø 65 mm
29895	Pessario in silicone Ø 70 mm
29896	Pessario in silicone Ø 75 mm
29897	Pessario in silicone Ø 80 mm
29898	Pessario in silicone Ø 85 mm
29899	Pessario in silicone Ø 90 mm
29900	Pessario in silicone Ø 95 mm
PESSARI IN SILICONE BLU - autoclavabili*	
29905	Pessario in silicone blu Ø 70 mm
29906	Pessario in silicone blu Ø 75 mm
29907	Pessario in silicone blu Ø 80 mm

*Autoclavabili a 121°C/15 min o 134°C/10 min fino a 30 volte