

# LAMPADE AMBULATORIALI ALOGENE E LED PER ESAMI E PICCOLA CHIRURGIA

**2 LAMPADINE**

**40.000 LUX**

Trasformatore elettronico integrato nella base con doppio fusibile di protezione

**30747-8**

Altezza regolabile 60-160 cm

**30747**

**RIMS A**

**35.000 LUX LED**

Il braccio flessibile (60 cm) consente un posizionamento facilitato della luce ed è ricoperto da una guaina liscia bianca termoretraibile per una maggiore pulizia e disinfezione

**30759**

**30.000 LUX ALOGENA**

**30760**

Altezza regolabile 60-160 cm

**30760**

Manuale in: GB, FR, IT, DE, ES, PT

**50.000 LUX - ALOGENA**  
**15.000 LUX - LED**

**MIMSAL**


**30754**

**30756**

Altezza 50 cm (braccio) + 95 cm (carrello)

**30754**

- **30747 SOLESUD 2 su carrello - alogena**
  - **30748 SOLESUD 2 da parete - alogena** <sup>ⓑ</sup>
- Ideale per visite ginecologiche. Il riflettore in alluminio è dotato di due lampadine alogene dicroiche da 20 W 12 V IRC protette da vetro temperato, sigillato ermeticamente per proteggere da sporcizia e liquidi e dotato inoltre di una maniglia ergonomica. Le lampadine si accendono contemporaneamente, e, in caso di rottura di una delle due, la luce è sempre garantita. Il braccio flessibile è dotato di frizioni meccaniche. Un fascio di luce di diametro 180 mm si estende fino a 50 cm. Garantendo esaminazioni precise e affidabili. L'apparecchio è sorretto da un carrello a 5 ruote, alto 900 mm. Spina britannica a tre poli disponibile su richiesta. Produzione italiana.
- **30769 CARRELLO - ricambio - razza Ø 61 cm**
  - **30775 CONNETTORE DA ROTAIA**
  - **30764 LAMPADINA SOLESUD 2 - 20 W**

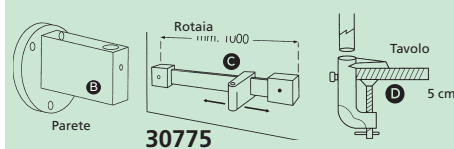

- **30760 SIMPLEX su carrello - alogena**
  - **30761 SIMPLEX da parete** <sup>ⓑ</sup> - alogena
  - **30762 SIMPLEX da tavolo con morsetto** <sup>ⓐ</sup>
  - **30763 SIMPLEX da rotaia** <sup>ⓒ</sup> - alogena
- Lampada versatile provvista di una lampadina alogena dicroica da 35 W 12 V alloggiata all'interno del riflettore e protetta da un vetro temperato. Dotata di trasformatore elettronico integrato nella base, fermacavi con protezione spiralata e interruttore bipolare con spia verde. Il fusibile in ceramica offre una protezione ottimale.
- **30759 SIMPLEX su carrello - LED**
  - **30749 SIMPLEX da parete** <sup>ⓑ</sup> - LED
  - **30752 SIMPLEX da tavolo con morsetto** <sup>ⓐ</sup> - LED
- Le tre fonti di luce indipendenti permettono di ridurre l'ombra e forniscono una luce cilindrica profonda con un irraggiamento del calore ridotto. Ogni led possiede una resistenza che garantisce il funzionamento continuo della lampada anche in caso di difetto di uno dei LED. Altre specifiche simili alla versione alogena. Fabbricata in Italia.
- **30766 LAMPADINA SIMPLEX - IRC 35 W**
  - **30768 CARRELLO - base Ø 62 cm**
  - **30775 CONNETTORE DA ROTAIA CON MORSETTO**

- **30754 LUXIFLEX su carrello - alogena**
  - **30756 LUXIFLEX su carrello - LED**
- Lampada elegante e versatile per gli esami e la piccola chirurgia negli ambulatori, le cliniche e gli ospedali. Adatta anche per gli esami e gli interventi veterinari. Funzionamento a bassa tensione senza raggi infrarossi. Trasformatore elettronico situato nella parte inferiore della lampada. Il braccio flessibile e il carrello con 5 rotelle permettono un uso e un trasporto facili. Classe II. Fabbricata in Europa.
- **30757 LAMPADINA LUXIFLEX DI RICAMBIO - alogena**

**30712**

4 ore di accensione, 30 min di spegnimento  
Presa a 3 pin

**37.000 LUX**

Lunghezza braccio: 70 cm (35 cm flessibile, 35 cm rigido)

**30714**

Utilizzo continuo  
Presa Schuko

**20.000 LUX**

**30714**

| Modelli                                | SOLESUD 2   |  | SIMPLEX      |  | LUXIFLEX    |  | MINIMED 2                                 |  |
|--|-------------|--|--------------|--|-------------|--|---|--|
| Tipo di illuminazione                  | alogena     |  | alogena      |  | alogena LED |  | alogena LED                               |  |
| Consumo (Watt)                         | 2x20        |  | 35           |  | 3x1,4       |  | 35 10 50                                  |  |
| Vita lampadina (ore)                   | 5.000       |  | 5.000        |  | 50.000      |  | 5.000 25.000 7.000 30.000                 |  |
| Intensità luce a 50 cm (lux)           | 40.000      |  | 30.000       |  | 35.000      |  | 50.000 15.000 37.000 20.000               |  |
| Intensità luce a 1 m (lux)             | 8.000       |  | 8.000        |  | 13.000      |  | - - -                                     |  |
| Temperatura colore ±5% a 1 m (K)       | 3.000       |  | 3.000        |  | 4.200       |  | 4.000 3.000 3.100 7.000                   |  |
| Luminosità a 50 cm (Ø mm)              | 180         |  | 100          |  | 140         |  |   |  |
| Diametro esterno del riflettore (Ø mm) | 140         |  | 105          |  | 86          |  | 60 60                                     |  |
| Colore                                 | bianco      |  | bianco       |  | bianco      |  | bianco bianco bianco freddo bianco freddo |  |
| Norme                                  | IEC 60601-1 |  | IEC 598-2-25 |  | IEC 60601-1 |  | EN 60601-1-2 IEC 60601-1                  |  |
| Marchi                                 | CE 93/42    |  | CE 2006/95   |  | CE 93/42    |  | CE 93/42 CE 93/42                         |  |
| Peso (kg)                              | 6           |  | 5            |  | 5           |  | 9 9                                       |  |
| Alimentazione V                        | 230         |  | 230          |  | 100-230     |  | 230 230 190-265                           |  |
| Frequenza Hz                           | 50/60       |  | 50/60        |  | 50          |  | 50/60                                     |  |
| Tensione su richiesta (V-Hz)           |             |  |              |  | 110-60      |  |   |  |

\*minimo 50 pz.

- **30712 MINIMED 2 SU CARRELLO - alogena**
  - **30714 MINIMED 2 SU CARRELLO - 12 LED**
- Bassa tensione e alta definizione, illuminazione intensa. Braccio flessibile per un uso versatile. Fornite su un carrello con 5 rotelle per una facile mobilità. Fabbricate in Italia.
- **30744 LAMPADINA RICAMBIO - 50 W - alogena**