

## SISTEMA D'IRRIGAZIONE OTOCLEAR®

Il kit include:  
1 spray di lavaggio  
20 speculum otoclear  
1 bacinella

**BIONIX**

CE FDA



25858



• **25858 OTOCLEAR® DISPOSITIVO LAVAGGIO AURICOLARE**  
Dispositivo per lavaggio manuale e ad intermittenza. Fornisce un maggior volume in confronto a siringhe o altri dispositivi manuali. Il design efficiente e pratico consente un utilizzo con entrambe le mani.

• **25861 SPECULUM D'IRRIGAZIONE OTOCLEAR - monouso - conf. da 40 pz. - ricambio**

Il design a campana protegge contro i rischi di getto troppo forte. Lo speculum dirige i 3 getti d'acqua verso le pareti del canale uditivo, lontano dalla membrana timpanica, producendo così un lavaggio forte che rimuove il cerume.

La parte di uscita controlla i getti di ritorno e dirige lo scolo verso la bacinella.


• **25862 BACINELLE - conf. da 3 pz. - ricambio**



Termometro per la temperatura dell'acqua



Comfort del paziente migliorato grazie al design "gentle touch"

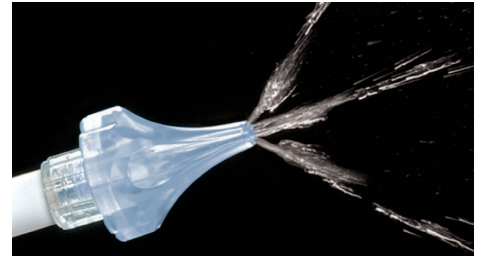

Azione brevettata a 3 getti

## CURETTE AURICOLARI GIMA

• **31470 CURETTE AURICOLARI GIMA - confezione da 10 pz.**  
Curette doppio uso: un lato a forma di cucchiaino, l'altro a forma di ansa. Ogni currette è confezionata in un sacchetto individuale.

31470



Lato cucchiaino

Lato ansa


## CURETTE AURICOLARI BIONIX

**FLEXLOOP:**  
Ansa da 4 mm per procedure di pulizia normali, molto flessibile e poco traumatica.



**MICROLOOP:**  
Perfetto per cerume impattato, grazie alla sua costituzione più rigida, testa da 3 mm

**INFANTSCOOP:**  
Ideale per orecchie piccole, può essere utilizzato attraverso un otoscopio, testa arrotondata da 2 mm.

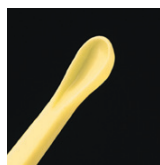

**CERASPOON:**  
Appositamente studiato per cerume viscoso, quando si richiede uno strumento con testa larga 4 mm

Sistema completo di gestione del cerume

- 31462 FLEXLOOP - bianco - conf. da 50 pz.
- 31464 INFANTSCOOP - azzurro - conf. da 50 pz.
- 31460 MICROLOOP - verde - conf. da 50 pz.
- 31467 CERASPOON - giallo - conf. da 50 pz.

CE FDA

La nostra gamma di curette è la soluzione più efficiente, economica e sicura per rimuovere il cerume - per orecchie di qualsiasi dimensione o consistenza della massa di cerume. **Comfort paziente:** le curette in metallo sono fredde, rigide ed affilate. Le curette BIONIX con estremità arrotondate in plastica riducono i traumi e i rischi di lacerazione. Latex free. **Efficacia:** le curette BIONIX presentano un'efficacia doppia rispetto ai presidi in metallo in quasi ogni situazione e la loro struttura in polipropilene le rende virtualmente indistruttibili.

**Monouso:** le curette non richiedono costosi e lenti processi di sterilizzazione ed eliminano il rischio di contaminazione.



**BIONIX**

## CURETTE ILLUMINATE BIONIX

• **31450 KIT MISTO CURETTE AUTOILLUMINANTI**  
Composto da 50 diverse curette illuminanti (8 FlexLoop e 7 ciascuno per gli altri modelli raffigurati sotto) + illuminatore a LED + lente

**BIONIX**

CE FDA



MicroLoop®  
Ø 3 mm



FlexLoop®  
Ø 4 mm



InfantScoop®  
Ø 2 mm



AngleLoop®  
Ø 4 mm



WaveCurette™  
Ø 2,5 mm



VersaLoop®  
estremità 3 mm



CeraSpoon®  
Larg. Estremità 4 mm



CeraPik™  
Scansionare QR code per vedere il video



31458

Pinzetta luminosa a LED per rimozione dei corpi estranei




31459

Curette luminosa a LED con estremità di 3 mm

- 31461 KIT MICROLOOP
- 31463 KIT FLEXLOOP
- 31465 KIT INFANTSCOOP
- 31466 KIT ANGLELOOP
- 31468 KIT VERSALOOP

Ogni kit è composto da 50 curette + illuminatore a LED + lente  
• 31458 KIT PINZETTE ILLUMINATE - scatola da 10 pinzette rimozione corpi estranei + lente + illuminatore a LED  
• 31459 CURETTE ARTICOLATE ILLUMINATE - scatola da 25 curette + lente + illuminatore a LED

L'estremità ha un raggio di movimento a 90° per facilitare la rimozione del cerume dalla tuba uditiva.

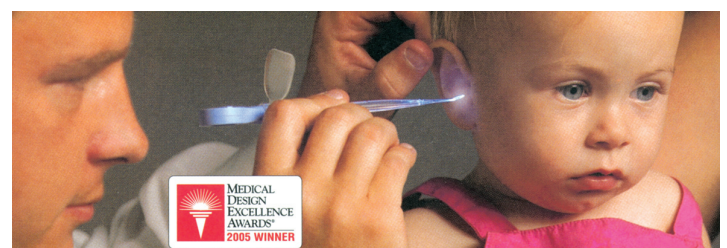

MEDICAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS 2005 WINNER