


STETOSCOPI ERKA FINESSE - PRODUZIONE TEDESCA

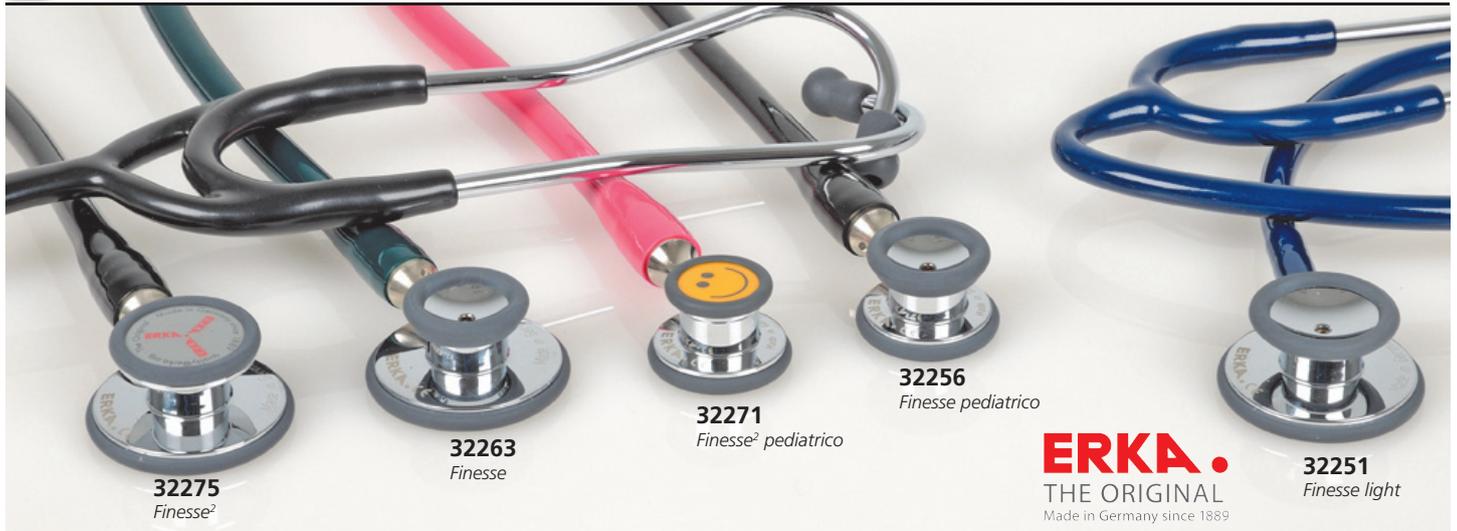

STETOSCOPI FINESSE - FINESSE LIGHT

Il doppio padiglione reversibile rende questo strumento ideale per qualsiasi tipo di visita medica.

Il lato della membrana garantisce una perfetta auscultazione per l'intero spettro di frequenza, mentre la campana è progettata appositamente per le basse frequenze.

STETOSCOPI FINESSE²

Il padiglione combinato presenta due lati membrana, ognuno dei quali garantisce un'auscultazione ottimale dell'intero spettro di frequenza. La membrana grande è ideale per l'auscultazione degli adulti; quella piccola per i bambini o i pazienti molto snelli.

Tutti i modelli Finesse vengono forniti con astuccio porta fonendo



CARATTERISTICHE	Finesse Light	Finesse e Finesse ²
Il lato convesso della membrana ERKA offre una risonanza e un suono eccellenti.	X	X
La ghiera anti-freddo assicura il massimo comfort al paziente.		X
La superficie ultra brillante, cromata, non porosa e in ottone del padiglione assicura un'igiene ottimale.	X	X
Due canali paralleli, posti all'interno di un unico tubo, evitano i rumori che si riscontrano nei fonendo a doppio tubo.		X
Attraverso la molla integrata nel tubo, non vi è alcuna perdita acustica dal padiglione all'orecchio.		X
Il design ergonomico e le olive ultra morbide garantiscono un'eccellente isolamento acustico contro i rumori delle interferenze esterne e massimizzano il comfort dell'utilizzatore.	X	X
L'inclinazione standard dei tubi a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del canale uditivo di ciascun utente.	X	X

Codice GIMA	Codice ERKA	STETOSCOPI ERKA lunghezza tubo 55 cm
FINESSE LIGHT ADULTO - testa Ø 44,5/33,5 mm		
32250	520 000 00	Finesse light - nero
32251	520 000 20	Finesse light - blu navy
32252	520 000 55	Finesse light - verde scuro
FINESSE PEDIATRICO - testa Ø 31/26,5 mm		
32256	549 000 00	Finesse pediatrico - nero
32257	549 000 25	Finesse pediatrico - azzurro
32258	549 000 35	Finesse pediatrico - rosa
FINESSE ADULTO - testa Ø 44,5/33,5 mm		
32262	550 000 00	Finesse adulto - nero
32263	550 000 05	Finesse adulto - grigio scuro
32264	550 000 20	Finesse adulto - blu navy
32265	550 000 55	Finesse adulto - verde scuro
32266	550 000 60	Finesse adulto - bordeaux
FINESSE² PEDIATRICO - testa Ø 30/21,3 mm		
32270	536 000 00	Finesse ² pediatrico - nero
32271	536 000 35	Finesse ² pediatrico - rosa
FINESSE² ADULTO - testa Ø 47/30 mm		
32275	535 000 00	Finesse ² adulto - nero
32276	535 000 05	Finesse ² adulto - grigio scuro
32277	535 000 20	Finesse ² adulto - blu navy

STETOSCOPI ERKAPHON - PRODUZIONE TEDESCA



Il doppio padiglione consente di passare facilmente dalla funzione membrana alla campana. La membrana è adatta all'auscultazione di frequenze alte e basse, mentre la campana è adatta per impulsi cardiaci

STETOSCOPI ERKAPHON:

Stetoscopi ad elevata precisione per un'acustica eccellente, prodotti in Germania. Tutti gli stetoscopi sono dotati di tubo a Y di 56 cm, archetto biauricolare e padiglione in ottone cromato (32350, 32358) o alluminio (32344-7), membrana Ø 44 mm, campana Ø 30 mm (solo 32358).

Codice GIMA	Codice ERKA	STETOSCOPI ERKAPHON
ERKAPHON PADIGLIONE PIATTO - alluminio		
32344	544 000 10	Erkaphon padiglione piatto - nero
32345	544 000 20	Erkaphon padiglione piatto - blu navy
32346	544 000 25	Erkaphon padiglione piatto - azzurro
32347	544 000 30	Erkaphon padiglione piatto - rosso
ERKAPHON PADIGLIONE PIATTO - cromato		
32350	543 000 10	Erkaphon padiglione piatto - nero
ERKAPHON PADIGLIONE DOPPIO - cromato		
32358	541 000 10	Erkaphon padiglione doppio - nero