

## PALLONI AMBU® MARK IV



### • 34200 PALLONE AMBU® MARK IV - adulti

Progettati in conformità all'originale pallone a doppia parete, i nuovi palloni sono 100% privi di lattice. I palloni Ambu sono più robusti e forniscono agli utenti risposte visive e tattili eccezionali, durante la rianimazione manuale, rendendo il funzionamento più sicuro. La limitazione incorporata della pressione impedisce la sovrappressione in presenza di resistenza nelle vie aeree del paziente.

Non è necessario premere energicamente.

Adatto ad adulti e bambini oltre i 15 kg (3 anni).

Fornito con mascherina n°5 e valvola. Autoclavabile a 134 °C.


Volume massimo erogato: 1'300 ml.

### • 34204 PALLONE AMBU® MARK IV - pediatrico

Come cod. 34200, ma per uso neonatale e pediatrico su bambini fino a 20 kg (4-5 anni). Fornito con mascherine N°0A, tubo ossigeno 250 mm e valvola limita pressione 4,0 kPa (40 cm H<sub>2</sub>O). Volume massimo erogato: 300 ml.

### • 34217 PALLONE AMBU® MARK IV - adulti - in sacca

Come cod. 34200 ma completo, sacca in nylon, 3 cannule di Guedel (piccola, media, grande), 1 apribocca, 1 tirlingua e 1 tubo ossigeno.

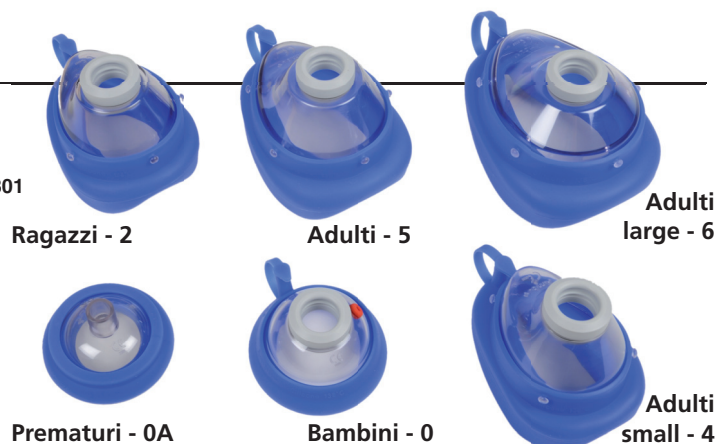

### MASCHERINE IN SILICONE TRASPARENTE - latex free

Mascherine in silicone adatte a tutti i tipi di respiratori automatici e rianimatori manuali.

La cupola e la cuffia anatomica sono state progettate per assicurare un'ottima tenuta facciale.

Controllo visivo di sanguinamento, vomito e respirazione spontanea. Autoclavabili a 134°C.

Codice GIMA	MASCHERINE FACCIALI TRASPARENTI LATEX-FREE E SACCA OSSIGENO AMBU
34210	Ambu Baby N° 0A - neonati/prematuri - blu
34205	Ambu Baby N° 0 - neonati/bambini - blu
34206	Ambu N° 2 - ragazzi - blu
34207	Ambu N° 3/4 - adulti small - blu
34208	Ambu N° 5 - adulti large - blu
34209	Ambu N° 6 - adulti large - blu
34215	Sacca ossigeno 1.500 ml - adulti



## PALLONI RIANIMAZIONE A DOPPIA CAMERA GIMA

### PALLONE RIANIMAZIONE GIMA - con doppia camera

Pallone rianimatore professionale con sacca interna gommata antistatica, autoclavabile ed auto-espandibile e con sacca esterna ultra-soffice.

Disponibile in due modelli: adulti e bambini.

Entrambi i modelli sono provvisti di connettori che rispettano la direttiva EN 1281-1 per: valvola peep, kit per intubazione, riserva di ossigeno, ingresso ossigeno, maschera facciale.

Radiotrasparente e privo di lattice. Il tutto è equipaggiato con valvole rimovibili ed autoclavabili.

Produzione Italiana.

### • 34240 PALLONE RIANIMAZIONE - adulti

Fornito con mascherina N° 4 - volume 1.900 ml

### • 34241 PALLONE RIANIMAZIONE - sacca

Come 34240 sopra ma confezionato in sacca di nylon e completo di mascherina N° 4, pinza tirlingua, apribocca, tubo ossigeno e 3 cannule di Guedel (piccola, media e grande).



### • 34242 PALLONE RIANIMAZIONE - bambino

Fornito con mascherina N° 2 - volume 400 ml.

321

