

LARINGOSCOPI A LED E F.O. XENON/ALOGENI GIMA GREEN



LARINGOSCOPI GIMA GREEN

- massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità
- lame studiate per una facile intubazione
- finitura opaca per ridurre i riflessi
- autoclavabile fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 2.000 volte.
- compatibili con la sterilizzazione al gas plasma
- tutte le lame sono compatibili con norma Green BS EN ISO 7376
- tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine
- lame lunga durata. GIMA offre una garanzia di 3 anni.
- ampia selezione di fonti di alimentazione: batterie tipo "AA" e "C" o batterie ricaricabili da 2,5 e 3,5 V
- manici disponibili con lampadine xenon/alogene o LED da 2,5 e 3,5 V
- i manici da 2,5 V possono essere usati con batterie standard o ricaricabili
- lame e manici non magnetici

LAME MC INTOSH

LAME MILLER

MAXLITE



Lame Miller e Mc Intosh Gima Green e Maxlite

- Gima Green fascio di F.O., Ø 4,0 mm con più di 5.500 fibre individuali
- Maxlite Miller e Mc Int Ø fascio 3,0/4,5 m con oltre 5.000/6.500 fibre individuali
- dotate di fibra staccabile (Gima Green)
- fibre di alta qualità che garantiscono un'ottima trasmissione della luce
- 12.500 LUX con lampadina alogena 3,5 V, 18.000 LUX con lampadina LED 2,5 V, 30.000 LUX con lampadina LED 3,5 V
- Maxlite Mc Int: 8.000/14.000/20.000/40.000 LUX

Codice GIMA	LAME FIBRE OTTICHE "GIMA MAXLITE"	A	B
58051	MILLER N° 0 lama - neonati	80	55
58052	MILLER N° 1 lama - bambini	100	75
58056	Mc INTOSH N° 0 lama - neonati	82	57
58057	Mc INTOSH N° 1 lama - bambini	93	68
58058	Mc INTOSH N° 2 lama - ragazzi	115	90
58059	Mc INTOSH N° 3 lama - adulti	135	110
58060	Mc INTOSH N° 4 lama - adulti large	155	130
58061	Mc INTOSH N° 5 lama - adulti x-large	176	151
Codice GIMA	LAME FIBRE OTTICHE "GIMA GREEN"	A	B
34460	MILLER N° 00 OXY lama - prematuri	65	40
34461	MILLER N° 0 lama - neonati	78	53
34462	MILLER N° 1 lama - bambini	102	77
34463	MILLER N° 2 lama - ragazzi	155	130
34464	MILLER N° 3 lama - adulti	195	170
34469	Mc INTOSH N° 0 lama - neonati	80	55
34470	Mc INTOSH N° 1 lama - bambini	92	67
34471	Mc INTOSH N° 2 lama - ragazzi	100	75
34472	Mc INTOSH N° 3 lama - adulti	130	105
34473	Mc INTOSH N° 4 lama - adulti large	155	130
34474	Mc INTOSH N° 5 lama - adulti x-large	175	150
*fornito con guida luce per fibra ottica amovibile			
F.O. DI RICAMBIO PER "GIMA GREEN"			
34483	F.O. di ricambio per "GIMA GREEN" N°3		
34484	F.O. di ricambio per "GIMA GREEN" N°4		
34486	F.O. di ricambio - "GIMA GREEN" specificare codice		


- 31542 BASE DI RICARICA GIMA - 100/200 V - 50/60 Hz
- Può caricare sia le batterie da 2,5 V/3,5 V NiCa, NiMH che quelle ricaricabili Li-Ion. L'unità è stata studiata per evitare le cariche eccessive grazie all'indicatore del livello di carica. Può caricare contemporaneamente il manico adulto e quello pediatrico.



La base di ricarica include un adattatore pediatrico, un supporto a muro, un connettore UK, US e EU

MANICO RICARICABILE XENON/ALOGENO

MANICO RICARICABILE LED

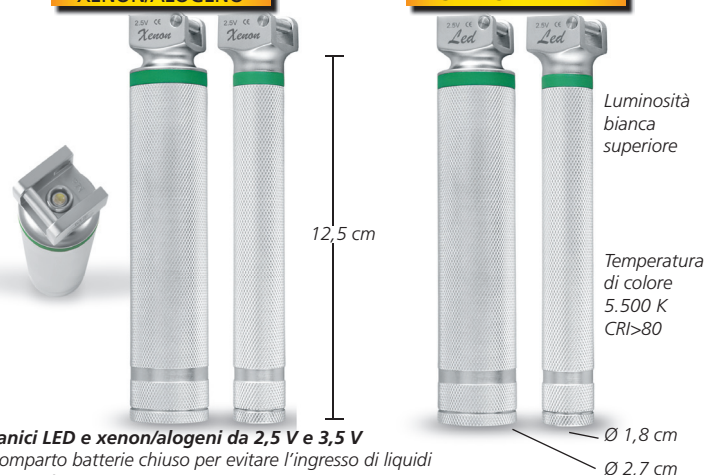

Manici LED e xenon/alogeni da 2,5 V e 3,5 V

- comparto batterie chiuso per evitare l'ingresso di liquidi
- manici forniti con lampadina. Batteria non inclusa.
- manico robusto in metallo rivestito di cromo

MANICI RICARICABILI GIMA GREEN

Codice GIMA	MANICI RICARICABILI "GIMA GREEN" E BATTERIE 2,5 V
34480	Manico pediatrico in metallo ricaricabile (2 batterie AA) - 2,5 V
34481	Manico adulti in metallo ricaricabile (2 batterie C) - 2,5 V
34466	Batteria ricaricabile pediatrica Li-ion 2,5 V 1.000 mAh (AA)
34467	Batteria ricaricabile adulti Li-ion 2,5V 2.200 mAh (C)
34485	Lampadina alogena 2,5 V (minimo vendita 6 pezzi)
MANICI RICARICABILI "GIMA GREEN" E BATTERIE 3,5 V LINEA VECCHIA batterie compatibili con manici ped. fino a lotto 8 e adulti fino a lotto 7	
34487	Manico pediatrico in metallo ricaricabile (3,5 V) linea vecchia
34488	Manico adulti in metallo ricaricabile (3,5 V) linea vecchia
34489	Batteria ricaricabile NiCa pediatrica 3,5 V/700 mAh per 34487
34490	Batteria ricaricabile NiCa adulti 3,5 V/1'300 mAh per 34488
34491	Lampadina alogena 3,5 V

MANICI RICARICABILI "GIMA GREEN" F.O. XENON/ALOGENO 3,5 V

34456	Manico pediatrico in metallo ricaricabile (3,5 V)
34457	Manico adulti in metallo ricaricabile (3,5 V)
31540	Batteria ricaricabile pediatrica Li-ion** 3,5 V per 34456
**per manici venduti dopo Maggio 2013	
31541	Batteria ricaricabile adulti Li-ion** 3,5 V per 34457, 34482
34491	Lampadina alogena 3,5 V

MANICI ricaricabili A F.O. LED 2,5 V E 3,5 V

34476	Manico pediatrico a LED ricaricabile 2,5 V
34477	Manico adulto a LED ricaricabile 2,5 V
34482	Manico in metallo adulto ricaricabile - LED 3,5 V

MANICO COMPATIBILE - BATTERIA - LAMPADINA

Codice GIMA	Manico		V	Batteria			Lampadina
	Xenon	LED		Standard 2xAA	Ricaricabile 2xC	Li-ion*	
34480	Ped.	-	2,5	si	no	34466	34485
34481	Adulto	-	2,5	no	si	34467	34485
34456	Ped.	-	3,5	no	no	31540	34491
34457	Adulto	-	3,5	no	no	31541	34491
34476	-	Ped.	2,5	si	no	34466	-
34477	-	Adulto	2,5	no	si	34467	-
34482	-	Adulto	3,5	no	no	31541	-

*Le batterie Li-Ion hanno il doppio della capacità delle batterie di taglia equivalente NiMH.