

MATERASSINI ANTIDECUBITO AD ARIA E COMPRESSORE

• 28483 KIT MASTER (MATERASSO 28492 + COMPRESSORE 28482)


• 28492 MATERASSINO AD ARIA A BOLLE

Materasso suddiviso da una serie di bolle che si gonfiano e si sgonfiano alternativamente nel senso latitudinale mediante compressore.

Il continuo movimento è efficace per prevenire i problemi da decubito meno gravi. ISO 03.33.06.018

CARATTERISTICHE TECNICHE MATERASSINI - 28482

Dimensioni: 190x85 cm Spessore PVC: 0,4 mm
Misure gonfiabili: 160x85 cm Adatto a persone fino a: 90 kg
Peso: 3 kg

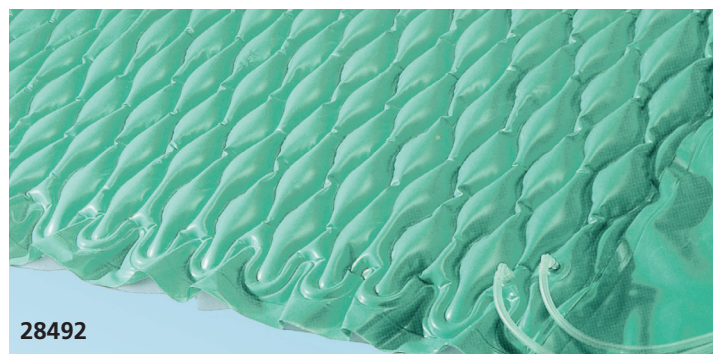

• 28482 COMPRESSORE MASTER - con regolatore di pressione
Realizzato in ABS rigido, particolarmente robusto, può essere appoggiato a terra, essendo munito di piedini in gomma o appeso a lato del letto. A compressore acceso il materasso si gonfierà totalmente dopo circa 20 minuti. Dispone di una manopola di controllo che consente la regolazione della pressione, in modo da adattarsi a pazienti da 40 a 90 kg (28493, 28495) o 120 kg (28493, 28495). Portata d'aria: 2,5 l/min - Il compressore Master è adatto sia a materiali a bolle che ad elementi. PVC ignifugo.

• 28481 MEMBRANA - ricambio per 28482/3

CARATTERISTICHE TECNICHE PER COMPRESSORI MASTER - RINT PLUS
Dimensioni: 315x150x120 mm Adatto per materassi a bolle o a elementi
Peso: 1,95 Kg Pressione operativa: 30-120 mm/Hg
Alimentazione: 230 V - 50 Hz Norme: IEC-601-1 classe II Tipo B
Assorbimento: 8 W Prodotto italiano



Il compressore Master può essere appoggiato al pavimento o appeso a lato del letto



28482

Compressore di qualità, silenzioso e a lunga durata

Manuale d'uso multilingue: GB, FR, IT, ES, DE

• 28495 MATERASSO RINT PLUS AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI
Realizzato in PVC molto resistente ma morbido, con 17 grandi elementi intercambiabili. Dotato di funzione CPR (Rianimazione Cardio Polmonare) che consente l'immediato sgonfiamento degli elementi. Fornito con guaina protettiva impermeabile, resistente al vapore e bielastica. Fabbriato in Italia.

• 28496 ELEMENTI INTERCAMBIABILI - ricambio per 28495

• 28497 GUAINA (COVER) - ricambio per 28495

CARATTERISTICHE TECNICHE MATERASSINI - 28495
Dimensioni: 195x85x10,5 cm
Misure gonfiabili: 170x90 cm
Peso: 5,5 kg
Spessore PVC: 0,4 mm
Numero di elementi: 17
Adatto a persone fino a: 120 kg



28498

L'altezza elevata degli elementi rende il materasso Rint Plus adatto a pazienti con rischio medio di piaghe da decubito

MATERASSO AD ACQUA IN PVC

• 28499 MATERASSO ANTIDECUBITO AD ACQUA

Fabbricato in PVC con una struttura esterna gonfiabile stabilizzante al fine di prevenire un eccessivo movimento di tipo ondulatorio del liquido e tre unità indipendenti.

Permette la distribuzione del peso corporeo sull'intera superficie del materasso, alleggerendo pressione arteriosa e l'esposizione al rischio di macerazione della pelle. Facile da usare, può supplire un normale materasso ed è lavabile. Venduto con pompa manuale, 2 disinfettanti e tubo di gonfiaggio.

Misure: 190x85 cm. Peso 4 kg.

Spessore PVC 0,4 mm.

ISO 03.33.06.015

FABBRICATO IN ITALIA



Ogni elemento misura 60x70 cm


28499

Bordo in PVC rigido gonfiabile con aria

MATERASSO AD ACQUA IN PVC

• 28502 MATERASSO AD ACQUA IN PVC

Facilita i movimenti e distribuisce la pressione su tutta la superficie di supporto. La doppia cucitura sigillata garantisce una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Materiale PVC estremamente robusto e facile da pulire con qualsiasi detergente delicato. Contorno ad aria + 3 elementi ad acqua. Fornito con pompa a mano e tubo.

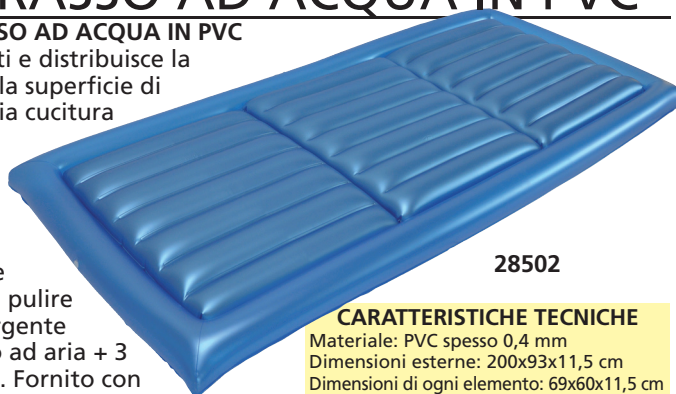

28502

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: PVC spesso 0,4 mm
Dimensioni esterne: 200x93x11,5 cm
Dimensioni di ogni elemento: 69x60x11,5 cm
Peso: 3,5 kg

BACINELLA SHAMPOO

• 28507 BACINELLA PER SHAMPOO

Bacinella gonfiabile ideale per lavare la testa alle persone allettate. Supporta la testa, il collo e le spalle durante lo shampoo. La profondità di 20 cm evita gli schizzi. Il tubo di scarico elimina l'acqua e la schiuma. Fornito con sacca per l'acqua e soffione da doccia a clip. Dimensioni: 53x61x20 cm. Portata: 10 l.

• 28509 SACCA PER L'ACQUA - ricambio



28509

Sacca per trasportare l'acqua laddove non sia accessibile

28507